




VAC 1288-PC HD LIPO - SCALE FOR HIGH DEFINITION LIPOSUCTION SURGERY:

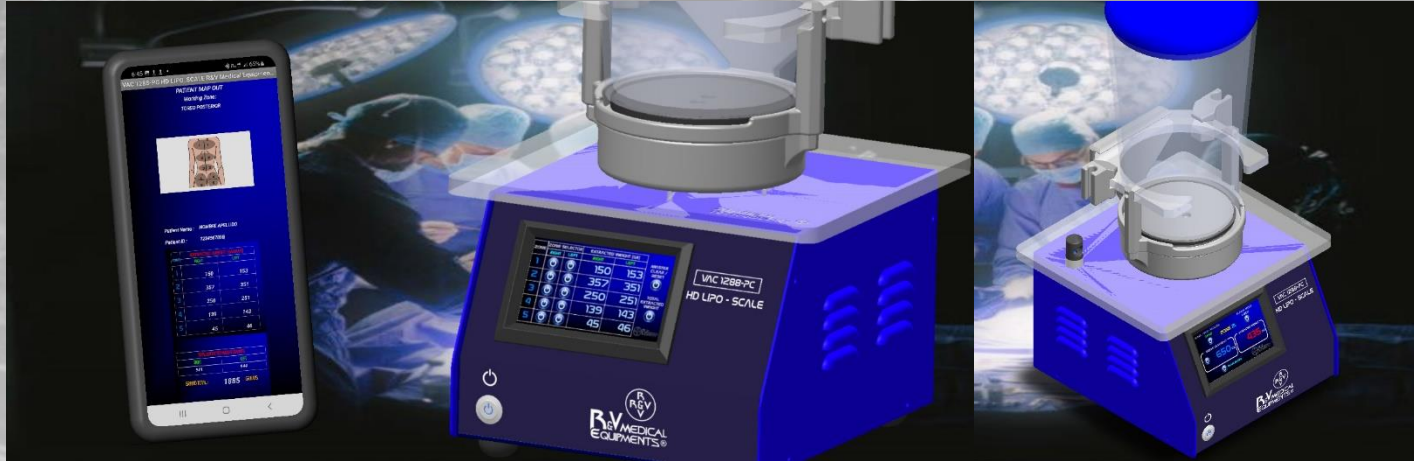

PRESENTACION :

Con la aparición de nuevos descubrimientos y avances en el desarrollo tecnológico y científico, la técnica quirúrgica de la liposucción se ha convertido en un procedimiento de elevada complejidad, en el cual la búsqueda de una mayor precisión en la simetría y los volúmenes o pesos extraídos, es día a día más exigente, dando lugar a la llegada de la técnica de Liposucción de alta definición, también conocida como Liposucción HD.

Para cumplir con este nivel de exigencia, hemos creado un computador de liposucción de alta precisión con función de programación del peso a extraer en diez zonas, el cual hace posible obtener un excelente control en la simetría, lanzado al mercado en Octubre de 2022 en el marco de la celebración de nuestro trigésimo aniversario.

Esta poderosa maquina, incluye un sistema de última generación para el intercambio de los datos obtenidos durante la cirugía, con una App previamente instalada en un teléfono celular, lo cual brinda la opción de adicionarlos a la historia clínica, almacenarlos y / o compartirlos.

La App adicionalmente permite capturar la imagen de la paciente con la marcación previa a la cirugía, con el propósito de asignarle a cada zona de trabajo el peso deseado a extraer.

Siendo compatible con todos los liposccionadores existentes en el mercado, la maquina incluye un sistema automático de control de la succión, con el cual se logra incrementar la eficiencia de la unidad de liposucción, ya que impide que la presión de vacío se descargue cada vez que el peso programado en cada zona es alcanzado.

Estas extraordinarias características técnicas únicas en el mercado, sumadas a un excelente diseño en operatividad, hacen del VAC 1288-PC HD LIPO-SCALE la herramienta ideal para cumplir con las exigencias en el control de la simetría, que plantea la llamada liposucción de alta definición o liposucción HD.



VAC 1288-7C HD LIPO - SCALE FOR HIGH DEFINITION LIPOSUCTION SURGERY:

COMPUTADOR DE LIPOSUCCIÓN DE
ALTA PRECISIÓN !!!

FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL
PESO A EXTRAER EN DIEZ ZONAS.

ENTREGA DE LOS DATOS DEL PESO
EXTRAÍDO TANTO DE CADA ZONA
COMO DE LA SUMA TOTAL.

GENERACIÓN DE UN INFORME
A TRAVÉS DE UNA APP INSTALADA
EN EL CELULAR

COMPATIBLE CON TODOS LOS
LIPOSUCCIONADORES
DEL MERCADO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Computador de liposucción de alta precisión con función de programación del peso a extraer en diez zonas, permitiendo obtener un **excelente control de la simetría**.
- ✓ Entrega del dato tanto del peso subtotal extraído de cada zona, como de la suma total del mismo.
- ✓ Conexión vía bluetooth con una App instalada en el celular para recibir los datos del peso extraído.
- ✓ Generación a través de la App de un archivo de salida con los datos para adicionarlos a la historia clínica, almacenarlos y / o compartirlos.
- ✓ Compatible con todos los liposccionadores del mercado.
- ✓ Control automático de la succión, con lo cual incrementa la eficiencia del liposccionador.
- ✓ Pantalla de 4,3" de excelente calidad y gran visibilidad con función de "touch screen"
- ✓ Voltaje de alimentación: 110 - 220 Volts. A.C. 50 / 60 Hz.